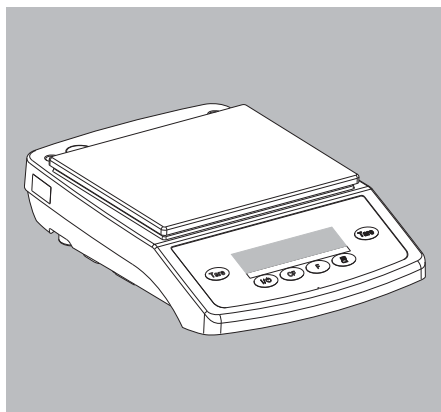
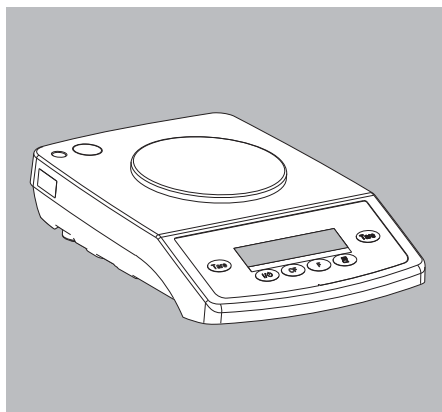
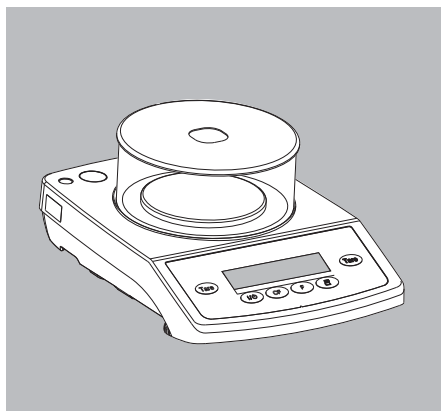
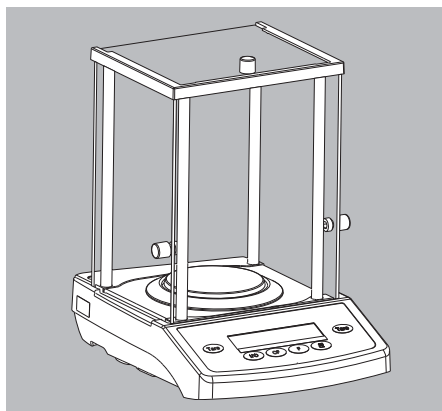


## Mode d'emploi

# Sartorius Talent, M-power Sartorius Gem, Gold

Balances électroniques d'analyse,  
de précision et pour métaux précieux



# Sommaire

|                      |   |
|----------------------|---|
| Sommaire             | 2 |
| Conseils de sécurité | 2 |
| Mise en service      | 3 |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Fonctionnement                      | 7 |
| Elements d'affichage et de commande | 7 |
| Pesée simple                        | 8 |
| Ajustage                            | 9 |

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Programmes d'application           | 10 |
| Total net/Deuxième mémoire de tare | 10 |
| Comptage                           | 11 |
| Pesée en pourcentage               | 12 |
| Calcul de la valeur moyenne        | 13 |
| Commutation d'unités               | 14 |

## Réglages (menu)

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Réglages des paramètres (menu) | 15 |
| Vue d'ensemble des paramètres  | 16 |
| Procès-verbal ISO/BPL          | 18 |
| Interface de données           | 20 |

|                   |    |
|-------------------|----|
| Messages d'erreur | 21 |
|-------------------|----|

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Entretien et maintenance | 22 |
|--------------------------|----|

|           |    |
|-----------|----|
| Recyclage | 23 |
|-----------|----|

## Données techniques de l'appareil

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Caractéristiques techniques | 24 |
| Accessoires (options)       | 33 |
| Déclaration de conformité   | 35 |

# Conseils de sécurité

## Sécurité

- Veuillez lire attentivement ce manuel de mode d'emploi avant d'utiliser votre nouvelle balance afin d'éviter tout dommage.

⚠ N'utilisez pas votre balance dans les domaines à risques d'explosions.

⚠ Utilisez uniquement des piles ou des accumulateurs 8× AA, Mignon en vente dans le commerce.

⚠ Ne connectez ou déconnectez les appareils auxiliaires qu'une fois la balance débranchée.

⚠ Des influences électromagnétiques extrêmes peuvent occasionner une interférence sur la valeur affichée. Après la fin de l'influence perturbatrice le produit est à nouveau utilisable conformément aux dispositions.

## Installation

⚠ Attention si vous utilisez des câbles RS232 de marque de fabrication étrangère ou en vente dans le commerce : ces câbles ont souvent une mauvaise affectation des broches pour les appareils Sartorius ! C'est pourquoi vous devez vérifier les schémas de câblage et supprimer les branchements non conformes.

- Les accessoires et les options de Sartorius sont adaptés de manière optimale à l'appareil. Veuillez donc ne pas utiliser d'appareils ni d'accessoires qui ne sont pas d'origine Sartorius. L'utilisateur engage sa propre responsabilité concernant toute modification et tout raccordement de câbles ou d'appareils non livrés par Sartorius. C'est à lui de vérifier ces modifications. Sur simple demande, nous mettons à votre disposition une documentation concernant les caractéristiques de fonctionnement minimales des appareils (conformément aux normes concernant la définition de l'immunité aux émissions parasites).
- N'ouvrez pas la balance ! Si vous endommagez la bande de sécurité, vous perdez tout droit à la garantie.

# Mise en service

## Conditions de stockage et de transport

- Ne pas exposer l'appareil à des températures, des chocs, des vibrations et une humidité extrêmes.

## Déballage

- Aussitôt après avoir déballé l'appareil, veuillez vérifier s'il ne présente aucune détérioration externe visible.
- Si la balance devait présenter une détérioration, veuillez vous reporter au chapitre « Entretien et maintenance », paragraphe « Contrôle de sécurité ».
- Veuillez conserver tous les éléments de l'emballage au cas où une éventuelle réexpédition serait nécessaire. Avant le transport, démontez tous les câbles de connexion afin d'éviter tout dommage.

## Contenu de la livraison

- balance
- plateau de pesée
- support de plateau uniquement avec les modèles à plateau de pesée rond
- coupelle uniquement avec les modèles GE et GD
- bloc d'alimentation

En plus avec les modèles AZ214, AZ124, AZ64, TE214S, TE124S, TE64, GD603, GD103, GD502-DS :

- anneau de blindage
- plaque de blindage
- housse de protection

En plus avec les modèles TE313S-DS, TE153S-DS :

- paravent avec portes coulissantes

En plus avec les modèles TE313S, TE153S, GD252 :

- paravent cylindrique en verre avec couvercle

En plus avec les modèles GD252-DS, GD502-DS :

- paravent avec portes coulissantes
- poids d'ajustage de 50 g (F1)

## Installation

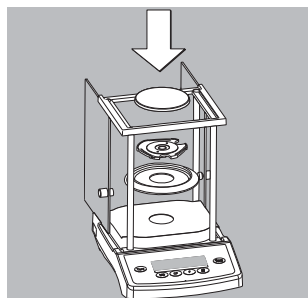
Lors de l'installation, choisir un emplacement adéquat afin de ne pas exposer la balance aux influences externes suivantes :

- chaleur due à un radiateur ou aux rayons du soleil,
- courants d'air directs causés par des fenêtres ou des portes ouvertes,
- vibrations pendant la pesée,
- humidité extrême.

## Adaptation de la balance à son environnement

Il peut se produire de la condensation lorsqu'un appareil froid est placé dans un environnement nettement plus chaud.


Adaptez l'appareil, débranché du secteur, à la température de la pièce pendant environ deux heures.



### Montage de la balance


Balances avec paravent à portes coulissantes

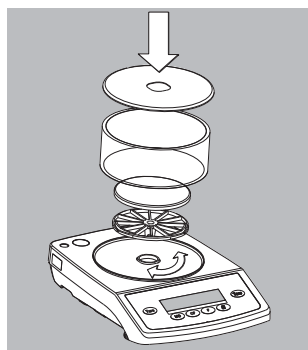- Installer successivement les éléments suivants dans la chambre de pesée :
  - plaque de blindage
  - anneau de blindage (pas avec TE313S-DS, TE153S-DS)
  - support de plateau
  - plateau de pesée
  - coupelle pour pierres précieuses (uniquement sur les modèles GD)



Balances avec paravent cylindrique en verre

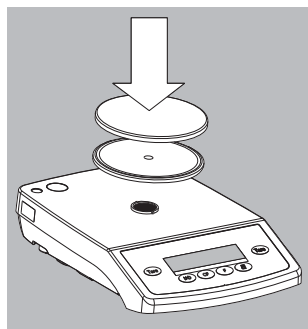- Installer successivement les éléments suivants :
  - poser le couvercle avec le rebord vers le haut sur la balance et le tourner jusqu'à ce qu'il soit bloqué.
  - support de plateau
  - plateau de pesée
  - paravent cylindrique en verre
  - coupelle pour pierres précieuses (uniquement sur les modèles GD)
  - couvercle avec le rebord vers le bas




Balances avec plateau de pesée rond

- Installer successivement les éléments suivants :
  - support de plateau
  - plateau de pesée
  - coupelle pour pierres précieuses (uniquement sur les modèles GE)

Balances avec plateau de pesée rectangulaire

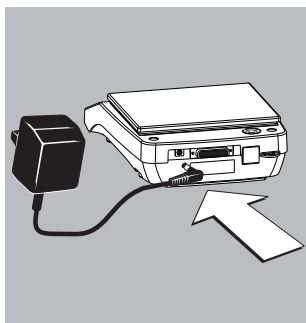- poser le plateau de pesée
- coupelle pour pierres précieuses (uniquement sur les modèles GE)



### Raccordement au secteur/Mesures de protection

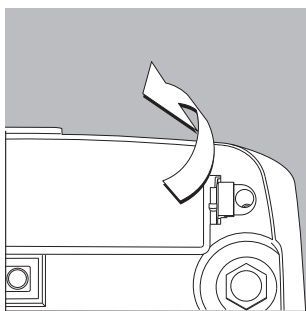
N'utilisez que des blocs d'alimentation d'origine Sartorius pour l'Europe : 6971948.

- Insérez la fiche coudée dans la balance.
- Raccordez le bloc d'alimentation à une prise secteur.

La tension de sortie est reliée au boîtier de la balance par un pôle. Le boîtier de la balance doit être mis à la terre.

### Mise en place de la pile/de l'accumulateur

(pas sur les modèles AZ214, AZ124, AZ64, AZ3102, AZ1502, TE214S, TE124S, TE64, GD603, GD103, GD502-DS, GD252, TE313S, TE153S, TE3102S, GE3102, GE2102, TE1502S, GE1302)



- La pile ou l'accumulateur ne font pas partie de la livraison.

△ Utiliser uniquement une pile ou un accumulateur 8× AA/Mignon en vente dans le commerce.

△ Charger l'accumulateur uniquement à l'aide d'un chargeur de pile externe.

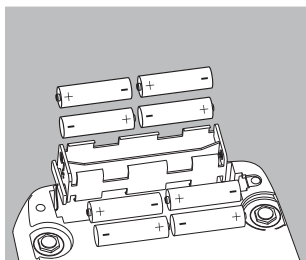
- Tourner la balance sur le côté.

- Ouvrir le compartiment à pile.


- Placer la pile ou l'accumulateur 8× AA/Mignon dans le support à pile.

- Respecter la polarité.

- Fermer le compartiment à pile en appuyant dessus jusqu'à ce qu'il s'enclenche.



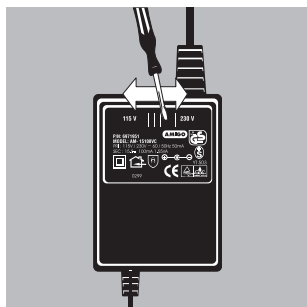△ Les piles ou accumulateurs usagés sont des ordures spéciales (pas des ordures ménagères) : ils doivent être traités en conformité avec la loi sur les ordures industrielles.




### Choix de la tension du secteur (optionnel)

Pour choisir la tension du secteur, utilisez les blocs d'alimentation d'origine Sartorius suivants :

- bloc d'alimentation TNG8 référence 6971951 (universel)
- ou
- bloc d'alimentation TNG8 référence 6971952 (pour la Grande-Bretagne).

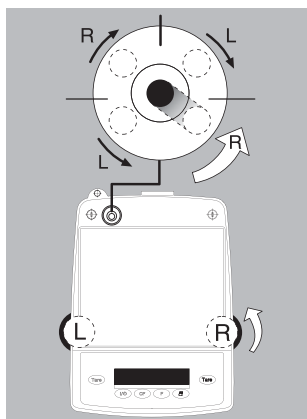- Pousser le commutateur sur la tension souhaitée (230 V ou 115 V).




### Mise à niveau de la balance

(uniquement sur les modèles AZ..., GD..., GE3102, GE2102, GE1302, TE...-L, TE214S, TE124S, TE64, TE313S, TE153S, TE3102S, TE1502S)

Remettre la balance à niveau après chaque changement du lieu de travail. La mise à niveau est réalisée seulement avec les deux pieds de réglage avant.

- Visser les deux pieds de réglage arrière (uniquement sur GE3102, GE2102, GE1302, TE3102, TE1502).
- Visser les pieds de réglage avant, selon le schéma ci-contre, jusqu'à ce que la bulle d'air du niveau à bulle soit centrée.
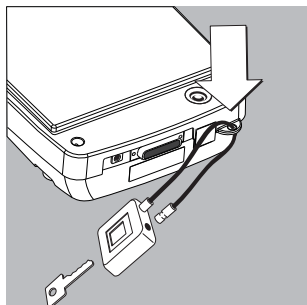
> En général, plusieurs étapes sont nécessaires à la mise à niveau.




### Système antivol

Utilisez l'œillet de fixation à l'arrière de la balance comme système antivol.

- Fixez la balance sur le lieu d'installation, par exemple au moyen d'une chaîne ou d'un cadenas.

# Fonctionnement
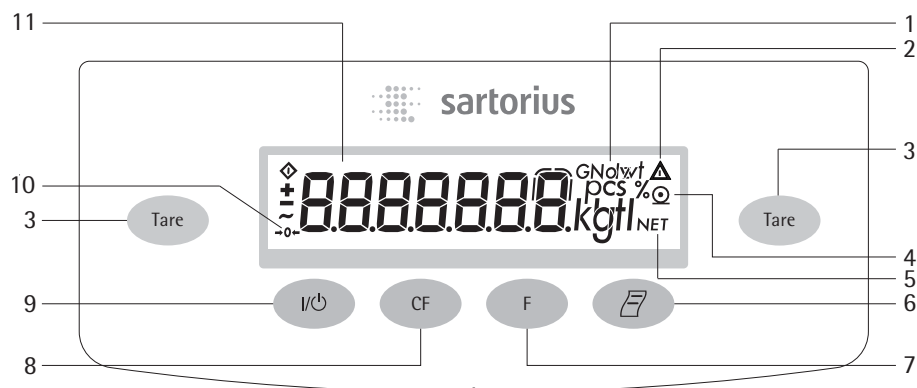
## Éléments d'affichage et de commande (vue d'ensemble)



### Pos. Identification



|   |   |
|---|---|
| 1 | Unités de pesée   |
| 2 | Identification :<br>pas de valeur de pesée  |
| 3 | Tarage  |
| 4 | Pictogramme pour<br>«Impression active»   |
| 5 | Affichage : valeur brute et nette   |
| 6 | Sortie des données :<br>Cette touche active l'édition des<br>valeurs affichées par l'intermédiaire<br>de l'interface de données intégrée. |
| 7 | Démarrer le programme<br>d'application  |

### Pos. Identification

|    |  |
|----|--|
| 8  | Effacement (Clear Function)<br>Cette touche est utilisée en général<br>comme touche d'interruption :<br>– Terminer les programmes<br>d'application<br>– Interrompre les processus d'ajustage<br>démarrés   Quitter le menu |
| 9  | Marche/arrêt   |
| 10 | Pictogramme pour l'étendue zéro<br>(uniquement sur les modèles<br>approuvés pour l'utilisation en usage<br>réglementé)   |
| 11 | Affichage de la valeur de poids en<br>fonction de l'unité de base<br>sélectionnée  |

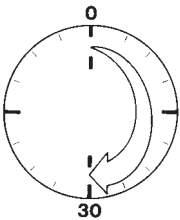
# Pesée simple

## Opérations préliminaires

- Mettre la balance en marche : appuyer sur la touche .
- Modifier les réglages si nécessaire : voir le chapitre « Réglages ».
- Tarer la balance si nécessaire : appuyer sur la touche .

Autre fonction :

- Eteindre la balance : appuyer sur la touche .



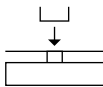

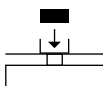


## Temps de préchauffage

Pour fournir des résultats précis, l'appareil a besoin d'un temps de préchauffage de 30 minutes. La balance atteint la température de fonctionnement nécessaire seulement après ce laps de temps.

## Exemple

Calcul de la valeur de pesée

| Etape  | Appuyer sur la touche   | Affichage   |
|--|---|---|
| 1. Mettre la balance sous tension                        |  |   |
| Un test automatique est effectué                         |   |  |
| 2. Poser le récipient pour l'échantillon (ici 52 g)      |  | + 52.0 g  |
| 3. Tarer la balance                                      |  | + 0.0 g   |
| 4. Déposer l'échantillon dans le récipient (ici 150,2 g) |  | + 150.2 g   |



# Ajustage

## Caractéristiques

Le processus d'ajustage ne peut être démarré que lorsque



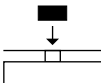
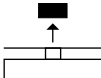
- la balance est déchargée,
- la balance est tarée,
- le signal de pesée interne est stable.

Si ces conditions ne sont pas remplies, un message d'erreur apparaît. Le poids nécessaire à l'ajustage apparaît à l'affichage (poids : voir le paragraphe « Accessoires »).

Sur les modèles AZ et TE, l'ajustage peut être effectué dans différentes unités pondérales : g, kg\*, lb (code *i. 4. x*).

L'ajustage peut être condamné (code *i. 5. 3*).

## Exemple

| Etape  | Appuyer sur la touche  | Affichage/<br>Sortie des données |
|--|--|----------------------------------|
| 1. Tarer la balance  |             | 0.0 g                            |
| 2. Démarrer le processus d'ajustage<br>Le poids d'ajustage est affiché sans unité (ici par ex. 1000 g) |  longuement | + 1000.0                         |
| 3. Déposer le poids d'ajustage affiché   |            | 1000.0                           |
| Après l'ajustage, le poids d'ajustage apparaît avec son unité  |  | + 1000.0 g                       |
| 4. Retirer le poids d'ajustage   |           | 0.0 g                            |

\* = pas sur les modèles avec une précision de lecture de 0,1 mg

# Programmes d'application

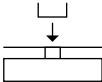
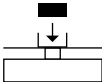
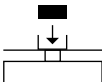
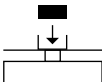
## Total net/Deuxième mémoire de tare

A l'aide de ce programme d'application, il est possible de peser des composants pour un mélange.

### Opérations préliminaires

Régler le programme d'application « Total net/Deuxième mémoire de tare » dans le menu : voir le chapitre « Réglages », code 2. 1. 3

### Exemple

| Etape  | Appuyer sur la touche   | Affichage/Sortie des données |
|--|---|------------------------------|
| 1. Poser le récipient vide destiné à recevoir les composants sur la balance                      |    | + 65.0 g                     |
| 2. Tarer   | Tare  | + 0.0 g                      |
| 3. Mettre le premier composant   |    | + 120.5 g                    |
| 4. Mémoriser le composant<br>Impression lorsque l'édition avec identification a été sélectionnée | F   | 0.0 g <sub>NET</sub>         |
|  |  | N1 + 120.5 g                 |
| 5. Mettre le composant suivant   |  | + 70.5 g                     |
| 6. Mémoriser le composant  | F   | 0.0 g <sub>NET</sub>         |
| 7. Mettre d'autres composants, si nécessaire   | Répéter les étapes 5 et 6 autant de fois qu'il est nécessaire                       |                              |
| 8. Afficher le poids total et, si nécessaire, remplir afin d'atteindre la valeur souhaitée       | CF  | + 191.0 g                    |

# Comptage

## Fonction

Ce programme d'application permet de déterminer le nombre de pièces ayant pratiquement le même poids.

## Opérations préliminaires

- Régler le programme d'application  
« Comptage » dans le menu : voir le chapitre  
« Réglages ».



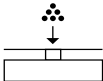

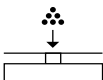
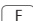
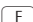
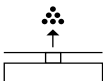
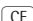
Code 2. 1. 4 Comptage

- Nombre de pièces de référence :  
Code 3. 3. 1 5 pièces  
Code 3. 3. 2 10 pièces (réglage d'usine)  
Code 3. 3. 3 20 pièces  
Code 3. 3. 4 50 pièces  
Code 3. 3. 5 100 pièces
- Résolution pour le comptage  
Code 3. 4. 1 Standard : avec 1 fois  
la précision de l'affichage  
(réglage d'usine)  
Code 3. 4. 2 10 fois plus précis que  
standard

## Exemple

Calcul d'un nombre de pièces inconnu en pesant le nombre de pièces de référence prédéfini.

Menu : programme d'application Comptage (code 2. 1. 4),  
nombre de pièces de référence 20 (code 3. 3. 3)

| Etape  | Appuyer sur la touche  | Affichage/Sortie des données |
|--|--|------------------------------|
| 1. Tarer la balance  |             | 0.0 g                        |
| 2. Information : afficher<br>le nombre de pièces de référence<br>(ici par ex. 20 pièces)   |  longuement | rEF 20 (brièvement)          |
| 3. Poser le nombre de pièces de<br>référence (20 pièces) (ici 66 g)  |            | + 66.0 g                     |
| 4. Démarrer l'application ;<br>le poids d'une seule pièce est<br>imprimé lorsque l'édition avec<br>identification a été sélectionnée |           | + 20 pcs                     |
| 5. Poser le nombre de pièces<br>inconnu (ici 174 pièces)   |           | wRef + 3.300 g               |
|  |  | + 174 pcs                    |
| 6. Afficher le poids   |           | + 574.2 g                    |
| 7. Afficher le nombre de pièces  |           | + 174 pcs                    |
| 8. Décharger la balance  |           | 0 pcs                        |
| 9. Effacer la valeur de référence  |           |                              |
| 10. Le cas échéant, renouveler l'opération à partir du point 4.  |  |                              |

# Pesée en pourcentage

## Fonction

Ce programme d'application permet de déterminer le pourcentage d'un échantillon par rapport à un poids de référence.

## Opérations préliminaires

- Régler le programme d'application « Pesée en pourcentage » dans le menu : voir le chapitre « Réglages ».
- Code 2. 1. 5      Pesée en pourcentage

## ○ Pourcentage de référence :

Code 3. 3. 1      5 %  
 Code 3. 3. 2      10 % (réglage d'usine)  
 Code 3. 3. 3      20 %  
 Code 3. 3. 4      50 %  
 Code 3. 3. 5      100 %

## ○ Résolution pour la pesée en pourcentage

Code 3. 4. 1      Standard : avec 1 fois la précision de l'affichage (réglage d'usine)  
 Code 3. 4. 2      10 fois plus précis que standard


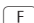
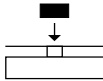

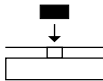




voir aussi le chapitre « Réglages »

## Exemple

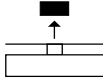Mesurer la valeur en pourcentage par rapport à un poids de référence mémorisé.

Menu : Programme d'application Pesée en pourcentage (code 2. 1. 5)

Menu : Pourcentage de référence 100 % (code 3. 3. 5)

| Etape   | Appuyer sur la touche  | Affichage/Sortie des données     |
|---|--|----------------------------------|
| 1. Tarer la balance   |             | 0.0 g                            |
| 2. Information : afficher le pourcentage de référence   |  longuement | REF 100                          |
| 3. Poser le poids de référence pour 100 % (ici 222,5 g)   |            | + 222.5 g                        |
| 4. Démarrer l'application ; impression lorsque l'édition avec identification a été sélectionnée |           | + 100.00 %<br>W x x% + 222.500 g |
| 5. Poser le poids inconnu (ici 322,5 g)   |           | + 144.94 %                       |
| 6. Afficher le poids  |           | + 322.5 g                        |
| 7. Afficher le pourcentage  |           | + 144.94 %                       |
| 8. Décharger la balance   |           | 0.00 %                           |
| 9. Effacer le pourcentage de référence  |           |                                  |
| 10. Le cas échéant, recommencer l'opération à partir du point 5.                                |  |                                  |

# Calcul de la valeur moyenne

## Fonction

Grâce à ce programme d'application, il est possible de peser des échantillons dans un environnement extrêmement instable. Pour cela, une valeur moyenne est calculée sur plusieurs cycles de mesure.

- Nombre de mesures nécessaires pour le calcul de la valeur moyenne :

|       |                              |
|-------|------------------------------|
| 3.3.1 | 5 mesures                    |
| 3.3.2 | 10 mesures (réglage d'usine) |
| 3.3.3 | 20 mesures                   |
| 3.3.4 | 50 mesures                   |
| 3.3.5 | 100 mesures                  |

## Opérations préliminaires


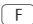
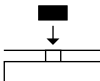
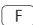
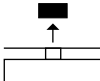

- Régler le programme d'application « Calcul de la valeur moyenne » dans le menu : voir le chapitre « Réglages ».
- Code 2.1.12 Calcul de la valeur moyenne

voir aussi le chapitre « Réglages »

## Exemple

Calcul de la valeur pondérale dans un environnement extrêmement instable avec 10 mesures pour le calcul d'une valeur moyenne.

Menu : Programme d'application Calcul de la valeur moyenne (code 2.1.12)

| Etape  | Appuyer sur la touche  | Affichage/Sortie des données                            |
|--|--|---|
| 1. Tarer la balance  |             | 0.0 g   |
| 2. Afficher le nombre de mesures pour le calcul de la valeur moyenne (ici par ex., 10 mesures) |  longuement | EF 10 (brièvement)                                      |
| 3. Poser l'échantillon (la valeur pondérale affichée oscille)                                  |            | 8888  |
| 4. Démarrer la mesure  |           | 8888<br>10<br>9<br>8<br>7<br>6<br>5<br>4<br>3<br>2<br>1 |
| Après 10 mesures   |  | + 275.5 g Δ   |
| Impression lorsque l'édition avec identification a été sélectionnée                            |  | Res + 275.5 g   |
| 5. Décharger la balance  |           | + 275.5 g Δ   |
| 6. Effacer le résultat de mesure   |           | (affichage stable)                                      |
| 7. Le cas échéant, recommencer l'opération à partir du point 3.                                |  |   |

# Commutation d'unités

Grâce à ce programme d'application, il est possible d'afficher une valeur de pesée dans deux unités différentes.

Régler le programme d'application « Commutation d'unités » dans le menu :  
voir le chapitre « Réglages » Code 2. 1. 2 Commutation d'unités

| Option du menu        | Unité              | Facteur de conversion | Edition |
|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------|
| 1. 7. 1 3. 1. 1       | Grammes            | 1                     | o       |
| 1. 7. 2 o 3. 1. 2 o   | Grammes            | 1                     | g       |
| 1. 7. 3 1) 3. 1. 3 1) | Kilogrammes        | 0,00100000000         | kg      |
| 1. 7. 4 3. 1. 4       | Carats             | 5                     | ct      |
| 1. 7. 5 3. 1. 5       | Livres             | 0,00220462260         | lb      |
| 1. 7. 6 3. 1. 6       | Onces              | 0,03527396200         | oz      |
| 1. 7. 7 3. 1. 7 2)    | Onces de Troy      | 0,03215074700         | ozt     |
| 1. 7. 8 3. 1. 8       | Taels Hongkong     | 0,02671725000         | tlh     |
| 1. 7. 9 3. 1. 9       | Taels Singapour    | 0,02645544638         | tls     |
| 1. 7. 10 3. 1. 10     | Taels Taïwan       | 0,02666666000         | tlt     |
| 1. 7. 11 3. 1. 11     | Grains             | 15,43235835000        | GN      |
| 1. 7. 12 3. 1. 12     | Pennyweights       | 0,64301493100         | dwt     |
| 1. 7. 13 3. 1. 13     | Milligrammes       | 1000                  | mg      |
| 1. 7. 14 3. 1. 14     | Pièces par livre   | 1,12876677120         | /lb     |
| 1. 7. 15 3. 1. 15     | Taels chinois      | 0,02645547175         | tlc     |
| 1. 7. 16 3. 1. 16     | Mommes             | 0,26670000000         | mom     |
| 1. 7. 17 3. 1. 17     | Carats autrichiens | 5                     | K       |
| 1. 7. 18 3. 1. 18     | Tolas              | 0,08573333810         | tol     |
| 1. 7. 19 3. 1. 19     | Bahts              | 0,06578947437         | bat     |
| 1. 7. 20 3. 1. 20     | Mesghals           | 0,217                 | MS      |

o = Réglage d'usine

1) = Pas sur les modèles ayant une précision de lecture  $\leq 0,2$  mg

2) = Réglage d'usine uniquement sur les modèles GE

## Fonction



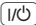











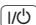
- Commuter entre l'unité de poids 1 et l'unité de poids 2 : appuyer sur la touche F.

# Réglages

## Réglages des paramètres (menu)

La configuration de la balance peut être adaptée aux exigences de l'utilisateur.

Exemple : Sélectionner l'adaptation au lieu d'installation « Environnement très instable » (code 1. 1. 4).

| Etape   | Appuyer sur la touche   | Affichage  |
|---|---|--|
| 1. Mettre la balance hors service   |    |    |
| 2. Mettre la balance sous tension et pendant l'affichage de tous les segments   | <br> brièvement | 1.   |
| <input type="radio"/> Se déplacer à l'intérieur d'un niveau du menu ; la première option du menu apparaît de nouveau après la dernière option du menu | plusieurs fois   | 2.<br>:<br>9.<br>1.  |
| 3. Sélectionner le niveau du menu 2   |    | 1. 1.  |
| 4. Sélectionner le niveau du menu 3   |    | 1. 1. 2 o  |
| 5. Niveau du menu 3 : sélectionner l'option du menu   | plusieurs fois    | 1. 1. 4  |
| 6. Confirmer la modification de réglage ; « o » indique l'option du menu réglée   | 2 secondes<br> longuement  | 1. 1. 4 o  |
| <input type="radio"/> Revenir au niveau du menu supérieur (à partir du 3ème niveau du menu)   |    | 1.   |
| <input type="radio"/> Régler, le cas échéant, d'autres options du menu  |  ,          |  |
| 7. Mémoriser le réglage des paramètres et quitter le menu ou  | 2 secondes<br> longuement  |  |
| <input type="radio"/> Quitter le réglage des paramètres sans mémorisation   |    |  |
| > Redémarrer l'application  |   | 0.0 g  |

## Réglages des paramètres (vue d'ensemble)

o Réglage d'usine

✓ Réglage de l'opérateur

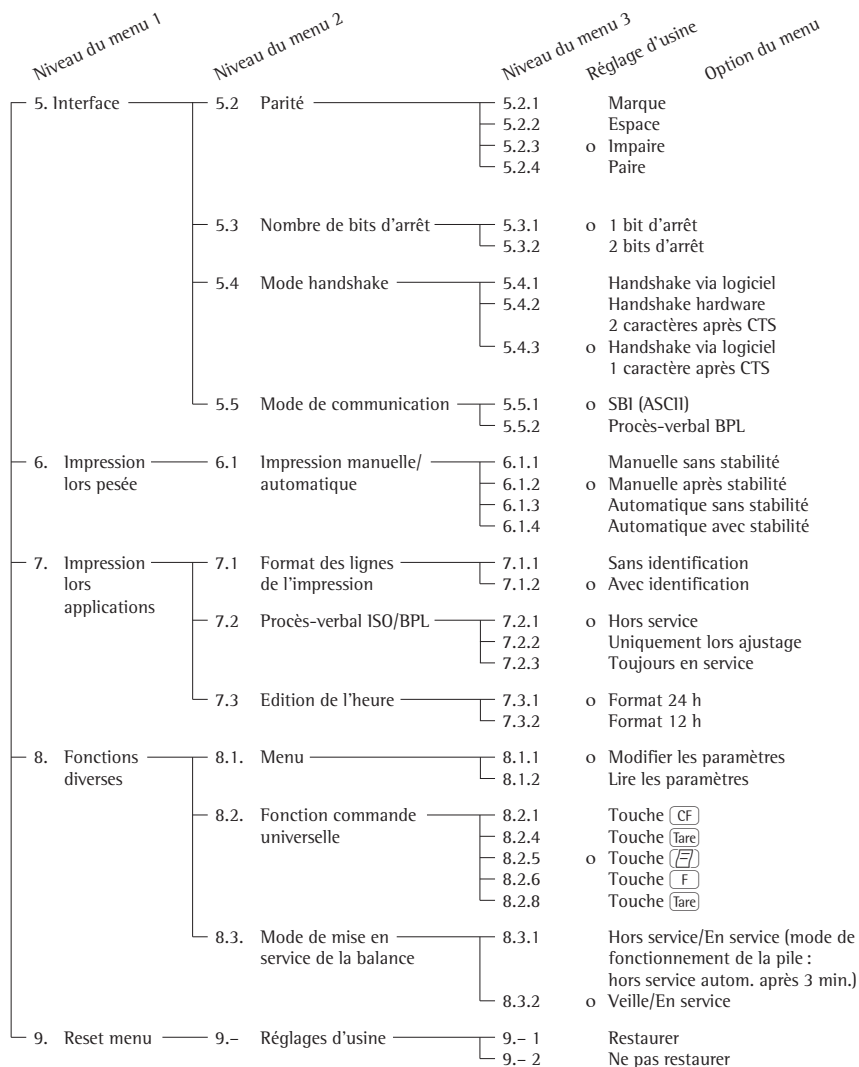
| Menu | Niveau du menu 1         | Niveau du menu 2   | Niveau du menu 3                       | Réglage d'usine             | Option du menu |
|------|--------------------------|--|--|-----------------------------|----------------|
| 1    | Pesée simple             | 1.1. Adaptation filtre   | 1.1.1                                  | Environnement très stable   |                |
|      |                          |  | 1.1.2                                  | o Environnement stable      |                |
|      |                          |  | 1.1.3                                  | Environnement instable      |                |
|      |                          |  | 1.1.4                                  | Environnement très instable |                |
|      |                          | 1.3. Etendue de stabilité  | 1.3.1                                  | 1/4 digit                   |                |
|      |                          |  | 1.3.2                                  | 1/2 digit                   |                |
|      |                          |  | 1.3.3                                  | 1 digit                     |                |
|      |                          |  | 1.3.4                                  | o 2 digits                  |                |
|      |                          |  | 1.3.5                                  | 4 digits                    |                |
|      |                          | 1.4. Unité de poids pour poids d'ajustage **   | 1.4.1                                  | o Grammes                   |                |
|      |                          |  | 1.4.2                                  | Kilogrammes <sup>1)</sup>   |                |
|      |                          |  | 1.4.3                                  | Livres                      |                |
|      |                          | 1.5. Ajustage  | 1.5.1                                  | o Libre                     |                |
|      |                          |  | 1.5.3                                  | Condamné                    |                |
|      |                          | 1.6. Zéro automatique  | 1.6.1                                  | o En service                |                |
|      |                          |  | 1.6.2                                  | Hors service                |                |
|      |                          | 1.7. Unité de poids 1  | voir chapitre « Commutation d'unités » |                             |                |
|      |                          | 1.8. Précision d'affichage   | 1.8.1                                  | o Standard                  |                |
|      |                          |  | 1.8.4                                  | Echelon de 1*               |                |
| 2.   | Programmes d'application | 2.1. Sélection programme — voir le programme d'application correspondant                           |  |                             |                |
|      |                          |  |  |                             |                |
| 3.   | Paramètres d'application | 3.1. Unité de poids 2 — voir chapitre « Commutation d'unités »                                     |  |                             |                |
|      |                          | 3.2. Précision d'affichage   | 3.2.1                                  | o Standard                  |                |
|      |                          |  | 3.2.4                                  | Echelon de 1*               |                |
|      |                          | 3.3. Pièces/% de référence — voir le programme d'application correspondant                         |  |                             |                |
| 5.   | Interface                | 3.4. Résolution pour comptage/pesée en pourcentage — voir le programme d'application correspondant |  |                             |                |
|      |                          |  |  |                             |                |
| 5.   | Interface                | 5.1  | Vitesse de transmission                |                             |                |
|      |                          |  | 5.1.1                                  | 150 bauds                   |                |
|      |                          |  | 5.1.2                                  | 300 bauds                   |                |
|      |                          |  | 5.1.3                                  | 600 bauds                   |                |
|      |                          |  | 5.1.4                                  | o 1200 bauds                |                |
|      |                          |  | 5.1.5                                  | 2400 bauds                  |                |
|      |                          |  | 5.1.6                                  | 4800 bauds                  |                |
|      |                          |  | 5.1.7                                  | 9600 bauds                  |                |

\* = uniquement sur les modèles GD, GE

\*\* = uniquement sur les modèles TE

<sup>1)</sup> = pas sur les modèles ayant une précision de lecture de 0,1 mg





# Procès-verbal ISO/BPL

## Caractéristiques

Les données de l'appareil et les numéros d'identification ainsi que la date actuelle peuvent être imprimés avant (en-tête BPL) et après les valeurs de la série de mesures (bas de page BPL).

Il s'agit des données suivantes :

En-tête BPL :

- Date
- Heure au début de la série de mesures
- Fabricant de la balance
- Modèle de balance
- Numéro de série du modèle
- Numéro de version du logiciel
- Numéro d'identification de la série de mesures

Bas de page BPL :

- Date
- Heure à la fin de la série de mesures
- Emplacement pour la signature


△ L'impression a lieu uniquement avec une imprimante de valeurs de mesure Sartorius YDP20-OCE.

## Réglage


- Régler les options du menu suivantes (mode de réglage, voir le chapitre « Réglages ») :
  - Procès-verbal BPL : code 5 5 2
  - Edition de procès-verbaux conformes aux normes ISO/BPL seulement lors de l'ajustage : code 7 2 2 ou édition de procès-verbaux conformes aux normes ISO/BPL toujours activée : code 7 2 3
  - Format des lignes de l'impression avec identification
    - 22 caractères : code 7 1 2
  - Edition de l'heure :
    - Format 24 h : code 7 3 1
    - Format 12 h : code 7 3 2


△ Avec les réglages suivants, aucun procès-verbal ISO/BPL n'est édité : code 6 1 3, 6 1 4 (impression automatique) et 7 1 1

## Touches de fonction

Pour éditer l'en-tête de procès-verbal et la première valeur de mesure : appuyer sur la touche .

- > L'en-tête de procès-verbal est édité lors de la première pression sur la touche.

Pour éditer l'en-tête de procès-verbal et les données de référence avec impression automatique lorsque le programme d'application est activé : appuyer sur la touche .

Pour terminer l'application : Terminer le programme d'application et éditer le bas de page de procès-verbal : touche .

Le procès-verbal ISO/BPL peut se composer des lignes suivantes :

|              |          |         |                                 |
|--------------|----------|---------|---------------------------------|
| -----        |          |         | Ligne en pointillés             |
| 17-Jan-2003  | 10:15    |         | Date/heure (début de la mesure) |
| SARTORIUS AG |          |         | Fabricant de la balance         |
| Mod.         | TE6100   |         | Type de balance                 |
| Ser. no.     | 10105355 |         | Numéro de série de la balance   |
| Ver. no.     | 00-19-41 |         | Version du logiciel             |
| ID           |          |         | Numéro d'ident.                 |
| -----        |          |         | Ligne en pointillés             |
| L ID         |          |         | N° de la série de mesures       |
| wRef         | +        | 21.14 g | Comptage : poids de référence   |
| Qnt          | +        | 235 pcs | Résultat du comptage            |
| Qnt          | +        | 567 pcs | Résultat du comptage            |
| -----        |          |         | Ligne en pointillés             |
| 17-Jan-2003  | 10:20    |         | Date/heure (fin de la mesure)   |
| Name :       |          |         | Emplacement pour la signature   |
| -----        |          |         | Interligne                      |
|              |          |         | Ligne en pointillés             |

Procès-verbal ISO/BPL pour l'ajustage externe :

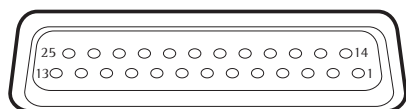
|              |          |          |                                 |
|--------------|----------|----------|---------------------------------|
| -----        |          |          | Ligne en pointillés             |
| 17-Jan-2003  | 10:30    |          | Date/heure (début de la mesure) |
| SARTORIUS AG |          |          | Fabricant de la balance         |
| Mod.         | TE6100   |          | Type de balance                 |
| Ser. no.     | 10105355 |          | Numéro de série de la balance   |
| Ver. no.     | 00-19-41 |          | Version du logiciel             |
| ID           |          |          | Numéro d'ident.                 |
| -----        |          |          | Ligne en pointillés             |
| Cal. Extern  |          |          | Mode de calibrage/ajustage      |
| Set          | +        | 5000.0 g | Valeur du poids d'ajustage      |
| -----        |          |          | Ligne en pointillés             |
| 17-Jan-2003  | 10:32    |          | Date/heure (fin de la mesure)   |
| Name :       |          |          | Emplacement pour la signature   |
| -----        |          |          | Interligne                      |
|              |          |          | Ligne en pointillés             |

# Interface de données

## Fonction

La balance est équipée d'une interface de données à laquelle il est possible de connecter un ordinateur (ou un autre appareil périphérique). Les fonctions de la balance et les fonctions des programmes d'application peuvent être modifiées, démarrées et contrôlées à l'aide d'un ordinateur.

## Connecteur femelle



Affectation des broches du connecteur femelle à 25 pôles, RS232 :

- Broche 1 : prise de terre
- Broche 2 : sortie de données (TxD)
- Broche 3 : entrée de données (RxD)
- Broche 4 : masse interne (GND)
- Broche 5 : Clear to Send (CTS)
- Broche 6 : non occupée
- Broche 7 : masse interne (GND)
- Broche 8 : masse interne (GND)
- Broche 9 : non occupée
- Broche 10 : non occupée
- Broche 11 : tension de charge de l'accumulateur  
+12 ... +20 V (1 \_ out 25mA)
- Broche 12 : Reset \_ Out \*)
- Broche 13 : sortie +5 V
- Broche 14 : masse interne (GND)
- Broche 15 : touche universelle
- Broche 16 : non occupée
- Broche 17 : non occupée
- Broche 18 : non occupée
- Broche 19 : non occupée
- Broche 20 : Data Terminal Ready (DTR)
- Broche 21 : masse interne (GND)
- Broche 22 : non occupée
- Broche 23 : non occupée
- Broche 24 : non occupée
- Broche 25 : sortie +5 V

## Opérations préliminaires

L'adaptation à l'autre appareil doit être effectuée dans le menu (voir chapitre « Réglages »).

Vous trouverez une description détaillée des ordres d'interfaces disponibles dans la « Description de l'interface des balances AZ, GD, GE et TE » que vous pouvez télécharger sur l'Internet ([www.sartorius.com](http://www.sartorius.com) voir « Download center »).

Les nombreuses propriétés des balances en matière de documentation des résultats peuvent être utilisées dans leur intégralité uniquement si l'on raccorde une imprimante Sartorius. Les résultats d'impression contribuent de manière significative à faciliter le travail conformément aux normes BPL.

Connexion pour  
commande universelle

\*) = Redémarrage de l'appareil périphérique

# Messages d'erreur

Les messages d'erreur apparaissent sur l'afficheur principal pendant environ 2 secondes. Ensuite le programme repasse automatiquement en mode de pesée.

| Affichage   | Cause   | Remède   |
|---|---|--|
| Aucun segment d'affichage n'apparaît  | Pas de tension d'alimentation<br>Le bloc d'alimentation n'est pas branché<br>La pile ou l'accumulateur est vide                           | Vérifier l'alimentation en courant<br>Brancher le bloc d'alimentation à l'alimentation en courant<br>Changer la pile<br>Recharger l'accumulateur avec un chargeur de piles externe |
| H   | L'étendue de pesée a été dépassée   | Décharger le plateau de pesée  |
| L   | Le plateau de pesée n'est pas posé<br><br>Le plateau de pesée touche quelque chose  | Poser le plateau de pesée correctement<br>Le plateau de pesée ne doit pas toucher les objets alentours   |
| E 02  | Une des conditions d'ajustage n'a pas été respectée, par ex. :<br>– pas mise à zéro<br>– le plateau est chargé                            | Décharger la balance<br>Tarer avec la touche <b>[Tare]</b><br>Ajuster seulement après l'affichage du zéro  |
| E 09  | Brut ≤ à zéro, pas possible de tarer  | Tarer la balance   |
| E 10  | La touche <b>[Tare]</b> est bloquée lorsque la deuxième mémoire de tare (Total net) est occupée. Les fonctions de tare sont verrouillées. | La touche de tare est de nouveau disponible dès que la mémoire de tare a été effacée à l'aide de la touche <b>[CF]</b>   |
| E 11  | La valeur pour la deuxième mémoire de tare n'est pas autorisée  | Appuyer sur la touche <b>[Tare]</b>  |
| E 22  | Le poids est trop petit ou<br>Aucun échantillon n'est posé sur le plateau lors des programmes d'application                               | Augmenter le poids   |
| E 30  | L'interface de données est bloquée pour l'impression  | Adressez-vous au service après-vente Sartorius   |
| L'étendue de pesée max. est inférieure à l'étendue de pesée max. indiquée au paragraphe « Caractéristiques techniques » | La balance a été mise en service sans que le plateau de pesée ne soit posé  | Poser le plateau de pesée.<br>Mettre la balance hors service puis la remettre en service en appuyant sur la touche <b>[UO]</b>   |
| Le résultat de pesée est manifestement faux   | La balance n'est pas ajustée<br>La balance n'a pas été tarée avant la pesée   | Ajuster<br>Tarer   |

Si d'autres erreurs survenaient, veuillez contacter le service après-vente Sartorius !

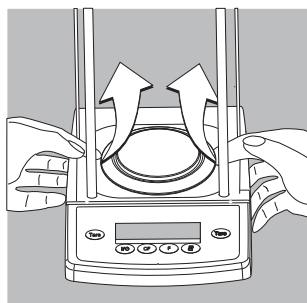
# Entretien et maintenance

## Service après-vente

Une maintenance régulière de votre balance par un spécialiste du service après-vente Sartorius garantit une précision de mesure durable. Sartorius peut vous proposer différents contrats de maintenance de 1 mois à 2 ans. La fréquence des opérations de maintenance dépend des conditions de fonctionnement et des exigences de l'utilisateur en matière de tolérance.

## Réparations

Les réparations ne doivent être effectuées que par du personnel spécialisé agréé qui possède les qualifications nécessaires au dépannage. Toute réparation non conforme peut représenter un danger pour l'utilisateur.



## Nettoyage

- Débrancher la balance de la tension du secteur, débrancher le cas échéant les câbles de données raccordés à la balance.
  - Nettoyer la balance avec un chiffon légèrement humecté d'eau savonneuse.
  - Essuyer et sécher la balance avec un chiffon doux.
  - Enlever et nettoyer le plateau de pesée :
  - Saisir l'anneau de blindage par en dessous et soulever le plateau de pesée avec le support de plateau afin de ne pas endommager le système de pesée.
- ⚠ Veiller à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans la balance.
- ⚠ Ne pas utiliser de produits de nettoyage corrosifs (solvants ou produits similaires).

## Nettoyage des surfaces en acier inoxydable

Nettoyez toujours toutes les parties en acier inoxydable à intervalles réguliers. Enlevez le plateau de pesée en acier inoxydable pour parfaitement le nettoyer à part. Nettoyez les parties en acier inoxydable de la balance avec un chiffon ou une éponge humides. Les produits d'entretien ménagers usuels appropriés pour l'acier inoxydable peuvent être utilisés en toute sécurité. Nettoyez les surfaces en acier inoxydable simplement en les frottant. Ensuite, rincez bien le plateau de pesée pour en retirer tous les restes de saleté et de produits d'entretien, puis laissez sécher l'appareil. Pour protéger encore davantage votre balance, vous pouvez appliquer une huile d'entretien. Utiliser des détergents exclusivement pour nettoyer les parties en acier inoxydable.

---

### **Contrôle de sécurité**

S'il vous semble que l'appareil ne peut plus fonctionner sans danger :

- Débranchez le bloc d'alimentation du secteur.
- > Assurez-vous que la balance ne sera plus utilisée.

Informez le service après-vente Sartorius.  
La remise en état de l'appareil ne doit être effectuée que par une main d'œuvre qualifiée.

### **Recyclage**

L'emballage des produits Sartorius se compose entièrement de matériaux respectant l'environnement qui devraient donc être apportés au service local de retraitement des déchets de votre commune. Veuillez vous informer auprès de la municipalité de votre ville des possibilités de recyclage (également pour les appareils usagés).

# Données techniques de l'appareil

## Caractéristiques techniques

### Série Talent

| Modèle  |         | TE214S   | TE124S               | TE64                 |
|---|---------|--|----------------------|----------------------|
| Etendue de pesée  | g       | 210  | 120                  | 60                   |
| Précision de lecture  | mg      | 0,1  | 0,1                  | 0,1                  |
| Etendue de tarage (soustractive)                                  | g       | 210  | 120                  | 60                   |
| Reproductibilité  | ≤±mg    | 0,1  | 0,1                  | 0,1                  |
| Ecart de linéarité  | ≤±mg    | 0,2  | 0,2                  | 0,2                  |
| Gamme de température spécifiée                                    |         | +10...+30 °C   |                      |                      |
| Conditions réglementaires d'utilisation                           |         | +5...+40 °C  |                      |                      |
| Dérive de sensibilité à l'intérieur de +10...+30 °C               | ≥±/K    | 2 · 10 <sup>-6</sup>   | 2 · 10 <sup>-6</sup> | 2 · 10 <sup>-6</sup> |
| Temps de mesure (typique)   | s       | 3  | 3                    | 3                    |
| Adaptation à l'environnement                                      |         | 4 échelons de filtrage optimisés   |                      |                      |
| Cycle d'affichage (selon l'échelon de filtrage utilisé)           | s       | 0,2–0,4  | 0,2–0,4              | 0,2–0,4              |
| Valeur de poids d'ajustage externe (classe de précision minimale) | g<br>lb | 200 (E2)<br>0,4  | 100 (E2)<br>0,2      | 50 (E2)<br>0,1       |
| Poids net, environ  | kg      | 3,2  | 3,2                  | 3,2                  |
| Dimensions du plateau de pesée                                    | mm      | 90 Ø   | 90 Ø                 | 90 Ø                 |
| Hauteur de la chambre de pesée                                    | mm      | 200  | 200                  | 200                  |
| Dimensions (L×P×H)  | mm      | 200×270×299  |                      |                      |
| Raccordement au réseau, tension                                   |         | par l'intermédiaire d'un bloc d'alimentation<br>230 V ou 115 V, +15%...– 20% |                      |                      |
| Fréquence   |         | 48–60 Hz   |                      |                      |
| Raccordement au réseau, tension continue                          | V       | 10 à 20  |                      |                      |
| Consommation (typique)  | W       | 1  | 1                    | 1                    |
| Durée de fonctionnement avec accumulateur externe YRB08Z          | h       | 20   | 20                   | 20                   |



## Série Gem

| Modèle  |      | GD603  | GD103                | GD502-DS             | GD252,<br>GD252-DS          |
|---|------|--|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| Etendue de pesée  |      | 605 ct/121 g   | 185 ct/37 g          | 505 ct/101 g         | 255 ct/51 g                 |
| Précision de lecture  |      | 0,001 ct/0,2 mg  | 0,001 ct/0,2 mg      | 0,005 ct             | 0,005 ct                    |
| Etendue de tarage (soustractive)                                    |      | 605 ct/121 g   | 185 ct/37 g          | 505 ct/101 g         | 255 ct/51 g                 |
| Reproductibilité  | ≤±   | 0,001 ct/0,2 mg  | 0,001 ct/0,2 mg      | 0,0075 ct            | 0,0075 ct                   |
| Ecart de linéarité  | ≤±   | 0,002 ct/0,4 mg  | 0,002 ct/0,4 mg      | 0,015 ct             | 0,015 ct                    |
| Gamme de température spécifiée                                      |      | +10...+30 °C   |                      |                      |                             |
| Conditions réglementaires d'utilisation                             |      | +5...+40 °C  |                      |                      |                             |
| Dérive de sensibilité à l'intérieur de +10...+30 °C                 | ≤±/K | 2 · 10 <sup>-6</sup>   | 2 · 10 <sup>-6</sup> | 4 · 10 <sup>-6</sup> | 4 · 10 <sup>-6</sup>        |
| Temps de mesure (typique)   | s    | 3  | 3                    | 2,5                  | 2,5                         |
| Adaptation à l'environnement  |      | 4 échelons de filtrage optimisés   |                      |                      |                             |
| Cycle d'affichage (selon l'échelon de filtrage utilisé)             | s    | 0,2–0,4  | 0,2–0,4              | 0,2–0,8              | 0,2–0,8                     |
| Valeur de poids d'ajustage externe g (classe de précision minimale) |      | 100 (F1)   | 20 (F1)              | 50 (F1)              | 50 (F1)                     |
| Poids net, environ  | kg   | 3,0  | 3,0                  | 1,7/2,7              | 1,7/2,7                     |
| Dimensions du plateau de pesée                                      | mm   | 90 Ø   | 90 Ø                 | 100 Ø                | 100 Ø                       |
| Hauteur de la chambre de pesée                                      | mm   | 133  | 133                  | 133                  | GD252-DS: 133               |
| Dimensions (L×P×H)  | mm   | 200×270×233  | 200×270×233          | 200×270×233          | 200×270×120/<br>200×270×233 |
| Raccordement au réseau, tension                                     |      | par l'intermédiaire d'un bloc d'alimentation<br>230 V ou 115 V, +15%...– 20% |                      |                      |                             |
| Fréquence   |      | 48–60 Hz   |                      |                      |                             |
| Raccordement au réseau, tension continue                            | V    | 10 à 20  |                      |                      |                             |
| Consommation (typique)  | W    | 1  | 1                    | 0,75                 | 0,75                        |
| Durée de fonctionnement avec accumulateur externe YRB08Z            | h    | 20   | 20                   | 25                   | 25                          |

## Série Talent et Gold

| Modèle  |          | TE313S,<br>TE313S-DS   | TE153S,<br>TE153S-DS | TE3102S,<br>GE3102 | GE2102             |
|---|----------|--|----------------------|--------------------|--------------------|
| Etendue de pesée  | g        | 310  | 150                  | 3100               | 2100               |
| Précision de lecture  | g        | 0,001  | 0,001                | 0,01               | 0,01               |
| Etendue de tarage (soustractive)                                  | g        | 310  | 150                  | 3100               | 2100               |
| Reproductibilité  | ≤±g      | 0,001  | 0,0015               | 0,01               | 0,015              |
| Ecart de linéarité  | ≤±g      | 0,002  | 0,003                | 0,02               | 0,04               |
| Gamme de température spécifiée                                    |          | +10...+30 °C]  |                      |                    |                    |
| Conditions réglementaires d'utilisation                           |          | +5... +40°C  |                      |                    |                    |
| Dérive de sensibilité à l'intérieur de +10...+30 °C               | ≤± /K    | 4·10 <sup>-6</sup>   | 4·10 <sup>-6</sup>   | 3·10 <sup>-6</sup> | 4·10 <sup>-6</sup> |
| Temps de mesure (typique)   | s        | 3  | 2,5                  | 2,5                | 2,5                |
| Adaptation à l'environnement                                      |          | 4 échelons de filtrage optimisés   |                      |                    |                    |
| Cycle d'affichage (selon l'échelon de filtrage utilisé)           | s        | 0,2–0,8  |                      |                    |                    |
| Valeur de poids d'ajustage externe (classe de précision minimale) | g<br>lb* | 200 (E2)<br>0,4  | 100 (F1)<br>0,2      | 2000 (E2)<br>4     | 2000 (F1)<br>–     |
| Poids net, environ  | kg       | 2,2/3,2  | 1,7/2,7              | 2,2                | 1,7                |
| Dimensions du plateau de pesée                                    | mm       | 100 Ø  | 100 Ø                | 174×143            | 174×143            |
| Dimensions (L×P×H)  | mm       | 200×270×120/<br>TE...-DS:<br>200×270×299                                     |                      | 200×270×70         |                    |
| Raccordement au secteur, tension                                  |          | par l'intermédiaire d'un bloc d'alimentation<br>230 V ou 115 V, +15%...– 20% |                      |                    |                    |
| Fréquence   |          | 48–60 Hz   |                      |                    |                    |
| Raccordement au secteur, tension continue                         | V        | 10 à 20  |                      |                    |                    |
| Consommation (typique)  | W        | 0,75   |                      |                    |                    |
| Durée de fonctionnement avec accumulateur externe YRB08Z          | h        | 20   | 25                   | 20                 | 20                 |

\* = uniquement sur les modèles TE

## Série Talent et Gold

| Modèle  |          | TE1502S   | GE1302               | GE812                | GE612, TE612, TE612-L |
|---|----------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Etendue de pesée  | g        | 1500  | 1300                 | 810                  | 610                   |
| Précision de lecture  | g        | 0,01  | 0,01                 | 0,01                 | 0,01                  |
| Etendue de tarage (soustractive)                                  | g        | 1500  | 1300                 | 810                  | 610                   |
| Reproductibilité  | ≤ ± g    | 0,015   | 0,015                | 0,01                 | 0,01                  |
| Ecart de linéarité  | ≤ ± g    | 0,03  | 0,03                 | 0,02                 | 0,02                  |
| Gamme de température spécifiée                                    |          | +10...+30 °C  |                      |                      |                       |
| Conditions réglementaires d'utilisation                           |          | +5...+40 °C   |                      |                      |                       |
| Dérive de sensibilité à l'intérieur de +10...+30 °C               | ≤ ± /K   | 4 · 10 <sup>-6</sup>  | 4 · 10 <sup>-6</sup> | 5 · 10 <sup>-6</sup> | 5 · 10 <sup>-6</sup>  |
| Temps de mesure (typique)   | s        | 2,5   | 2,5                  | 2                    | 2                     |
| Adaptation à l'environnement                                      |          | 4 échelons de filtrage optimisés  |                      |                      |                       |
| Cycle d'affichage (selon l'échelon de filtrage utilisé)           | s        | 0,2–0,8   |                      |                      |                       |
| Valeur de poids d'ajustage externe (classe de précision minimale) | g<br>lb* | 1000 (F1)<br>2  | 1000 (F1)<br>–       | 500 (F2)<br>–        | 500 (F2)<br>1         |
| Poids net, environ  | kg       | 1,7   | 1,7                  | 1,4                  | 1,4                   |
| Dimensions du plateau de pesée                                    | mm       | 174 × 143   | 174 × 143            | 116 Ø                | 116 Ø                 |
| Dimensions (L × P × H)  | mm       | 200 × 270 × 70  |                      |                      |                       |
| Raccordement au secteur, tension                                  |          | par l'intermédiaire d'un bloc d'alimentation 230 V ou 115 V, +15%...– 20% |                      |                      |                       |
| Fréquence   |          | 48–60 Hz  |                      |                      |                       |
| Raccordement au secteur, tension continue                         | V        | 10–20   |                      |                      |                       |
| Consommation (typique)  | W        | 0,75  |                      |                      |                       |
| Durée de fonctionnement avec Mignon, AA                           |          |   |                      |                      |                       |
| – pile, environ   | h        | –   | –                    | 50                   | 50                    |
| – accumulateur en cas de charge totale, environ                   | h        | –   | –                    | 20                   | 20                    |
| Durée de fonctionnement avec accumulateur externe YRB08Z          | h        | 25  | 25                   | 25                   | 25                    |

\* = uniquement sur les modèles TE

## Série Talent et Gold

| Modèle  |          | GE412, TE412<br>TE412-L  | GE212, TE212<br>TE212-L | GE7101                 | TE6101,<br>TE6101-L    |
|---|----------|--|-------------------------|------------------------|------------------------|
| Etendue de pesée  | g        | 410  | 210                     | 7100                   | 6100                   |
| Précision de lecture  | g        | 0,01   | 0,01                    | 0,1                    | 0,1                    |
| Etendue de tarage (soustractive)                                  | g        | 410  | 210                     | 7100                   | 6100                   |
| Reproductibilité  | ≤±g      | 0,01   | 0,01                    | 0,1                    | 0,1                    |
| Ecart de linéarité  | ≤±g      | 0,02   | 0,02                    | 0,2                    | 0,2                    |
| Gamme de température spécifiée                                    |          | +10...+30 °C   |                         |                        |                        |
| Conditions réglementaires d'utilisation                           |          | +5...+40 °C  |                         |                        |                        |
| Dérive de sensibilité à l'intérieur de +10...+30 °C               | ≤± /K    | 0,5 · 10 <sup>-5</sup>   | 1 · 10 <sup>-5</sup>    | 0,5 · 10 <sup>-5</sup> | 0,5 · 10 <sup>-5</sup> |
| Temps de mesure (typique)   | s        | 2  | 2                       | 2                      | 2                      |
| Adaptation à l'environnement                                      |          | 4 échelons de filtrage optimisés   |                         |                        |                        |
| Cycle d'affichage (selon l'échelon de filtrage utilisé)           | s        | 0,2–0,8  |                         |                        |                        |
| Valeur de poids d'ajustage externe (classe de précision minimale) | g<br>lb* | 200 (F2)<br>0,4  | 100 (M1)<br>0,2         | 5000 (F2)<br>10        | 5000 (F2)<br>10        |
| Poids net, environ  | kg       | 1,4  | 1,4                     | 1,7                    | 1,7                    |
| Dimensions du plateau de pesée                                    | mm       | 116 Ø  | 116 Ø                   | 174 × 143              | 174 × 143              |
| Dimensions (L × P × H)  | mm       | 200 × 270 × 70   |                         |                        |                        |
| Raccordement au secteur, tension                                  |          | par l'intermédiaire d'un bloc d'alimentation<br>230 V ou 115 V, +15%...– 20% |                         |                        |                        |
| Fréquence   |          | 48–60 Hz   |                         |                        |                        |
| Raccordement au secteur, tension continue                         | V        | 10 à 20  |                         |                        |                        |
| Consommation (typique)  | W        | 0,75   |                         |                        |                        |
| Durée de fonctionnement avec Mignon, AA                           |          |  |                         |                        |                        |
| – pile, environ   | h        | 50   |                         |                        |                        |
| – accumulateur en cas de charge totale, environ                   | h        | 20   |                         |                        |                        |
| Durée de fonctionnement avec accumulateur externe YRB08Z          | h        | 25   |                         |                        |                        |

\* = uniquement sur les modèles TE

## Série Talent et Gold

| Modèle  |           | GE4101, TE4101, ...-L  | GE2101, TE2101, ...-L | GE811              | TE601, ...-L       | TE12000, ...-L       | TE6100, ...-L      | TE4100, ...-L      |
|---|-----------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Etendue de pesée  | g         | 4100   | 2100                  | 810                | 610                | 12000                | 6100               | 4100               |
| Précision de lecture  | g         | 0,1  | 0,1                   | 0,1                | 0,1                | 1                    | 1                  | 1                  |
| Etendue de tarage (soustractive)                                  | g         | 4100   | 2100                  | 810                | 610                | 12000                | 6100               | 4100               |
| Reproductibilité  | <±g       | 0,1  | 0,1                   | 0,1                | 0,1                | 1                    | 1                  | 1                  |
| Ecart de linéarité  | ≤±g       | 0,2  | 0,2                   | 0,2                | 0,2                | 2                    | 2                  | 2                  |
| Gamme de température spécifiée                                    |           | +10...+30 °C   |                       |                    |                    |                      |                    |                    |
| Conditions réglementaires d'utilisation                           |           | +5...+40 °C  |                       |                    |                    |                      |                    |                    |
| Dérive de sensibilité à l'intérieur de +10...+30 °C               | ≤±/K      | 1·10 <sup>-5</sup>   | 2·10 <sup>-5</sup>    | 5·10 <sup>-5</sup> | 5·10 <sup>-5</sup> | 2,5·10 <sup>-5</sup> | 5·10 <sup>-5</sup> | 5·10 <sup>-5</sup> |
| Temps de mesure (typique)   | s         | 2  | 1,5                   | 1,5                | 1,5                | 1,5                  | 1,5                | 1,5                |
| Adaptation à l'environnement                                      |           | 4 échelons de filtrage optimisés   |                       |                    |                    |                      |                    |                    |
| Cycle d'affichage (selon l'échelon de filtrage utilisé)           | s         | 0,2–0,8  |                       |                    |                    |                      |                    |                    |
| Valeur de poids d'ajustage externe (classe de précision minimale) | kg<br>lb* | 2 (F2)<br>4  | 1 (M1)<br>2           | 0,5 (M1)<br>1      | 0,5 (M1)<br>1      | 5 (M1)<br>10         | 5 (M1)<br>10       | 2 (M1)<br>4        |
| Poids net, environ  | kg        | 1,7  |                       |                    |                    |                      |                    |                    |
| Dimensions du plateau de pesée                                    | mm        | 174×143  |                       |                    |                    |                      |                    |                    |
| Dimensions (L×P×H)  | mm        | 200×270×70   |                       |                    |                    |                      |                    |                    |
| Raccordement au secteur, tension                                  |           | par l'intermédiaire d'un bloc d'alimentation<br>230 V ou 115 V, +15%...– 20% |                       |                    |                    |                      |                    |                    |
| Fréquence   |           | 48–60 Hz   |                       |                    |                    |                      |                    |                    |
| Raccordement au secteur, tension continue                         | V         | 10 à 20  |                       |                    |                    |                      |                    |                    |
| Consommation (typique)  | W         | 0,75   |                       |                    |                    |                      |                    |                    |
| Durée de fonctionnement avec Mignon, AA                           |           |  |                       |                    |                    |                      |                    |                    |
| – pile, environ   | h         | 50   |                       |                    |                    |                      |                    |                    |
| – accumulateur en cas de charge totale, environ                   | h         | 20   |                       |                    |                    |                      |                    |                    |
| Durée de fonctionnement avec accumulateur externe YRB08Z          | h         | 25   |                       |                    |                    |                      |                    |                    |

\* = uniquement sur les modèles TE

## Caractéristiques techniques

### Série M-power

| Modèle  |         | AZ214   | AZ124                | AZ64                 |
|---|---------|---|----------------------|----------------------|
| Etendue de pesée  | g       | 210   | 120                  | 60                   |
| Précision de lecture  | mg      | 0,1   | 0,1                  | 0,1                  |
| Etendue de tarage (soustractive)                                  | g       | 210   | 120                  | 60                   |
| Reproductibilité  | ≤±mg    | 0,2   | 0,2                  | 0,2                  |
| Ecart de linéarité  | ≤±mg    | 0,3   | 0,3                  | 0,3                  |
| Gamme de température spécifiée                                    |         | +10...+30 °C  |                      |                      |
| Conditions réglementaires d'utilisation                           |         | +5...+40 °C   |                      |                      |
| Dérive de sensibilité à l'intérieur de +10...+30 °C               | ±%/K    | 2 · 10 <sup>-6</sup>  | 2 · 10 <sup>-6</sup> | 2 · 10 <sup>-6</sup> |
| Temps de mesure (typique)   | s       | 3   | 3                    | 3                    |
| Adaptation à l'environnement                                      |         | 4 échelons de filtrage optimisés  |                      |                      |
| Cycle d'affichage (selon l'échelon de filtrage utilisé)           | s       | 0,2–0,4   | 0,2–0,4              | 0,2–0,4              |
| Valeur de poids d'ajustage externe (classe de précision minimale) | g<br>lb | 200 (E2)<br>0,4   | 100 (E2)<br>0,2      | 50 (E2)<br>0,1       |
| Poids net, environ  | kg      | 3,2   | 3,2                  | 3,2                  |
| Dimensions du plateau de pesée                                    | mm      | 90 Ø  | 90 Ø                 | 90 Ø                 |
| Hauteur de la chambre de pesée                                    | mm      | 200   | 200                  | 200                  |
| Dimensions (L×P×H)  | mm      | 200×270×299   |                      |                      |
| Raccordement au réseau, tension                                   |         | par l'intermédiaire d'un bloc d'alimentation 230 V ou 115 V, +15%...- 20% |                      |                      |
| Fréquence   |         | 48–60 Hz  |                      |                      |
| Raccordement au réseau, tension continue                          | V       | 10 à 20   |                      |                      |
| Consommation (typique)  | W       | 1   | 1                    | 1                    |
| Durée de fonctionnement avec accumulateur externe YRB08Z          | h       | 20  | 20                   | 20                   |

## Série M-power

| Modèle  |         | AZ313  | AZ153              | AZ3102             | AZ1502             | AZ612              |
|---|---------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Etendue de pesée  | g       | 310  | 150                | 3100               | 1500               | 610                |
| Précision de lecture  | g       | 0,001  | 0,001              | 0,01               | 0,01               | 0,01               |
| Etendue de tarage (soustractive)  | g       | 310  | 150                | 3100               | 1500               | 610                |
| Reproductibilité  | ≤±g     | 0,003  | 0,003              | 0,015              | 0,015              | 0,015              |
| Ecart de linéarité  | ≤±g     | 0,004  | 0,004              | 0,03               | 0,03               | 0,03               |
| Gamme de température spécifiée  |         | +10...+30 °C)  |                    |                    |                    |                    |
| Conditions réglementaires d'utilisation                                     |         | +5... +40°C  |                    |                    |                    |                    |
| Dérive de sensibilité à l'intérieur de +10...+30 °C                         | ≤± /K   | 4·10 <sup>-6</sup>   | 4·10 <sup>-6</sup> | 3·10 <sup>-6</sup> | 4·10 <sup>-6</sup> | 5·10 <sup>-6</sup> |
| Temps de mesure (typique)   | s       | 3  | 3                  | 2,5                | 2,5                | 2,5                |
| Adaptation à l'environnement  |         | 4 échelons de filtrage optimisés   |                    |                    |                    |                    |
| Cycle d'affichage (selon l'échelon de filtrage utilisé)                     | s       | 0,2–0,8  |                    |                    |                    |                    |
| Valeur de poids d'ajustage externe (classe de précision minimale)           | g<br>lb | 200 (E2)<br>0,4  | 100 (F1)<br>0,2    | 2000 (E2)<br>4     | 1000 (F1)<br>2     | 500 (F2)<br>1      |
| Poids net, environ  | kg      | 2,2  | 1,7                | 2,2                | 1,7                | 1,4                |
| Dimensions du plateau de pesée  | mm      | 100 Ø  | 100 Ø              | 174×143            | 174×143            | 116 Ø              |
| Dimensions (L×P×H)  | mm      | 200×270×120  |                    | 200×270×70         |                    |                    |
| Raccordement au secteur, tension  |         | par l'intermédiaire d'un bloc d'alimentation<br>230 V ou 115 V, +15%...– 20% |                    |                    |                    |                    |
| Fréquence   |         | 48–60 Hz   |                    |                    |                    |                    |
| Raccordement au secteur, tension continue                                   | V       | 10 à 20  |                    |                    |                    |                    |
| Consommation (typique)  | W       | 0,75   |                    |                    |                    |                    |
| Hours of operation with<br>– Mignon, AA alkaline manganese battery, approx. | h       | –  | –                  | –                  | –                  | 50                 |
| – fully charged rechargeable 1000 mAh battery, approx.                      | h       | –  | –                  | –                  | –                  | 20                 |
| Durée de fonctionnement avec accumulateur externe YRB08Z                    | h       | 20   | 25                 | 20                 | 25                 | 25                 |

## Série M-power

| Modèle  |         | AZ212  | AZ6101                 | AZ4101               | AZ2101               | AZ601                |
|---|---------|--|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Etendue de pesée  | g       | 210  | 6100                   | 4100                 | 2100                 | 610                  |
| Précision de lecture  | g       | 0,01   | 0,1                    | 0,1                  | 0,1                  | 0,1                  |
| Etendue de tarage (soustractive)                                  | g       | 210  | 6100                   | 4100                 | 2100                 | 610                  |
| Reproductibilité  | ≤±g     | 0,015  | 0,1                    | 0,1                  | 0,1                  | 0,1                  |
| Ecart de linéarité  | ≤±g     | 0,03   | 0,3                    | 0,3                  | 0,3                  | 0,3                  |
| Gamme de température spécifiée                                    |         | +10...+30 °C   |                        |                      |                      |                      |
| Conditions réglementaires d'utilisation                           |         | +5...+40 °C  |                        |                      |                      |                      |
| Dérive de sensibilité à l'intérieur de +10...+30 °C               | ≤± /K   | 1 · 10 <sup>-5</sup>   | 0,5 · 10 <sup>-5</sup> | 1 · 10 <sup>-5</sup> | 2 · 10 <sup>-5</sup> | 5 · 10 <sup>-5</sup> |
| Temps de mesure (typique)   | s       | 2,5  | 2                      | 2                    | 2                    | 1,5                  |
| Adaptation à l'environnement                                      |         | 4 échelons de filtrage optimisés   |                        |                      |                      |                      |
| Cycle d'affichage (selon l'échelon de filtrage utilisé)           | s       | 0,2–0,8  |                        |                      |                      |                      |
| Valeur de poids d'ajustage externe (classe de précision minimale) | g<br>lb | 100 (M1)<br>0,2  | 5000 (F2)<br>10        | 2 (F2)<br>4          | 1 (M1)<br>2          | 0,5 (M1)<br>1        |
| Poids net, environ  | kg      | 1,4  | 1,7                    | 1,7                  | 1,7                  | 1,7                  |
| Dimensions du plateau de pesée                                    | mm      | 116 Ø  | 174×143                | 174×143              | 174×143              | 174×143              |
| Dimensions (L×P×H)  | mm      | 200×270×70   |                        |                      |                      |                      |
| Raccordement au secteur, tension                                  |         | par l'intermédiaire d'un bloc d'alimentation<br>230 V ou 115 V, +15%...– 20% |                        |                      |                      |                      |
| Fréquence   |         | 48–60 Hz   |                        |                      |                      |                      |
| Raccordement au secteur, tension continue                         | V       | 10 à 20  |                        |                      |                      |                      |
| Consommation (typique)  | W       | 0,75   |                        |                      |                      |                      |
| Durée de fonctionnement avec Mignon, AA                           |         |  |                        |                      |                      |                      |
| – pile, environ   | h       | 50   |                        |                      |                      |                      |
| – accumulateur en cas de charge totale, environ                   | h       | 20   |                        |                      |                      |                      |
| Durée de fonctionnement avec accumulateur externe YRB08Z          | h       | 25   |                        |                      |                      |                      |



## Accessoires (options)

| Article   | Référence        |
|---|------------------|
| <b>Imprimante des valeurs de mesure</b><br>pour l'édition de procès-verbaux avec horodateur, évaluation statistique, compteur d'items et afficheur L.C.D.   | <b>YDP20-OCE</b> |
| – Rouleau de papier (paquet de 5)   | <b>6906937</b>   |
| <b>Afficheur à distance</b>   |                  |
| – L.C.D.  | <b>YRD02Z</b>    |
| – rétroprojection   | <b>YRD13Z</b>    |
| <b>Jeu d'accumulateurs externes</b><br>rechargeables par le chargeur de piles joint (durée de fonctionnement selon le modèle : 20 ou 40 heures)   | <b>YRB08Z</b>    |
| <b>Logiciel « SartoConnect » pour le raccordement de la balance Sartorius à un ordinateur avec système d'exploitation Windows® 95/98 ou NT</b><br>Le programme permet une mémorisation directe des données déterminée par votre balance dans les programmes d'application de votre choix (par ex. Excel). | <b>YSC01L</b>    |
| <b>Câble de raccordement RS232C</b><br>pour le raccordement à une interface COM à 25 pôles  | <b>7357312</b>   |
| pour le raccordement à un ordinateur avec une interface COM à 9 pôles   | <b>7357314</b>   |
| <b>Elément de commande universelle :</b>  |                  |
| Pédale avec connecteur en T   | <b>YFS01</b>     |
| Boîtier de commande manuel avec connecteur en T   | <b>YHS02</b>     |
| <b>Connecteur en T</b><br>pour le raccordement de 2 appareils périphériques   | <b>YTC01</b>     |
| <b>Valise de transport</b>  |                  |
| – pour les modèles ayant une précision de lecture $\geq 1$ mg   | <b>YDB01TE</b>   |

| Article   | Référence  |
|---|------------|
| <b>Housse de protection</b>   |            |
| – uniquement pour les unités de commande pour les modèles GD..., AZ214, AZ124, AZ64, TE214S, TE124S, TE64, TE...-DS | 6960TE01   |
| – pour les modèles à plateau de pesée rectangulaire   | 6960TE03   |
| – pour les modèles à plateau de pesée rond  | 6960TE02   |
| Installer la housse de protection sur les modèles avec paravent cylindrique en verre :                              |            |
| – Enlever la surface de contact de l'unité.   |            |
| – Placer la housse de protection.   |            |
| – Coller la surface de contact sur la housse de protection.   |            |
| <b>Plateaux de pesée</b>  |            |
| – 300 ml, poids à vide 86 g, acier inoxydable   | 6407       |
| – 1000 ml, poids à vide 240 g, acier inoxydable   | 641211     |
| – 300 ml, poids à vide 22 g, aluminium  | 69641304   |
| – 62 Ø mm acier inoxydable  | 6910848    |
| – 85 ml, 70 Ø mm, aluminium   | YWP06G     |
| – 110 ml, 90 Ø mm, aluminium  | 69GP0003   |
| – 180 ml, 90 Ø mm, aluminium  | YWP05G     |
| – 270 ml, poids à vide 62 g, 137 Ø mm acier inoxydable  | YWP03G     |
| – 174 Ø mm acier inoxydable   | YWP04G     |
| <b>Poids d'ajustage</b>   |            |
| – pour AZ3102, TE3102S, (2000 g ; E2)   | YCW6228-00 |
| – pour AZ313, AZ214, TE313S, TE214S (200 g ; E2)  | YCW5228-00 |
| – pour AZ124, TE124S, (100 g ; E2)  | YCW5128-00 |
| – pour AZ64, TE64 (50 g ; E2)   | YCW4528-00 |
| – pour GD103 (20 g ; F1)  | YCW4238-00 |
| – pour GD252 (50 g ; F1)  | YCW4538-00 |
| – pour AZ153, GD603, TE153S (100 g ; F1)  | YCW5138-00 |
| – pour AZ1502, TE1502S, GE1302 (1 kg ; F1)  | YCW6138-00 |
| – pour GE2102 (2000 g ; F1)   | YCW6238-00 |
| – pour AZ612, GE812, GE612, GE811, TE601 (500 g ; F2)   | YCW5548-00 |
| – pour GE412, TE412 (200 g ; F2)  | YCW5248-00 |
| – pour AZ212, GE212, TE212 (100 g ; F2)   | YCW5148-00 |
| – pour AZ4101, TE4100, GE4101, TE4101 (2000 g ; F2)   | YCW6248-00 |
| – pour AZ2101, GE2101, TE2101 (1 kg ; F2)   | YCW6148-00 |
| – pour AZ6101, GE7101, TE6101, TE12000, TE6100 (5 kg ; F2)  | YCW6548-00 |
| ou (5 kg ; ± 25 mg)   | YSS653-00  |



**sartorius**  
mechatronics

## **CE** EG-Konformitätserklärung *EC Declaration of Conformity*

Sartorius AG  
Weender Landstr. 94 - 108  
37075 Göttingen, Germany

erklärt, dass das Betriebsmittel  
*declares that the equipment*

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Gerät:<br><i>Apparatus:</i>     | Elektronische Analysenwaage / Präzisionswaage<br><i>Electronic Analytical Balance / Precision Balance</i> |
| Baureihe / <i>Batch:</i>        | AZ..., GD..., GE..., TE..., ...   |
| Typbezeichnung:<br><i>Type:</i> | Siehe Anhang 1<br><i>See Annex 1</i>  |

mit den grundlegenden Anforderungen der folgenden Europäischen Richtlinien übereinstimmt:  
*complies with the basic requirements of the following European Directives:*

|   |   |
|---|---|
| Richtlinie 2004/108/EG<br>Directive 2004/108/EC | Elektromagnetische Verträglichkeit<br><i>Electromagnetic compatibility</i>  |
| Richtlinie 2006/95/EG<br>Directive 2006/95/EC   | Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen<br><i>Electrical equipment designed for use within certain voltage limits</i> |

Das Gerät erfüllt die anwendbaren Anforderungen der in Anhang 2 aufgeführten harmonisierten Europäischen Normen.

*The apparatus meets the applicable requirements of the harmonized European Standards listed in Annex 2.*

Jahr der Anbringung des CE-Zeichens: 10  
*Year of attachment of CE mark:*

Sartorius AG  
Göttingen, 2010-07-30

Dr. Reinhard Baumfalk  
Leitung Entwicklung  
Mechatronik  
*Vice President, R&D  
Mechatronics*

Dr. Dieter Klausgrete  
Leitung International Certification Management  
Mechatronik  
*Head of International Certification Management  
Mechatronics*



**sartorius**  
mechatronics

## EG-Konformitätserklärung *EC Declaration of Conformity*

Anhang 1 / *Annex 1*

Typ / type:

|        |          |        |           |           |
|--------|----------|--------|-----------|-----------|
| AZ64   | GD103    | GE212  | TE64      | TE1502S   |
| AZ124  | GD252    | GE412  | TE124S    | TE2101    |
| AZ224  | GD252-DS | GE612  | TE153S    | TE3102S   |
| AZ153  | GD502-DS | GE811  | TE153S-DS | TE4100    |
| AZ313  | GD603    | GE812  | TE212     | TE4100-L  |
| AZ212  |          | GE1302 | TE212-L   | TE4101    |
| AZ601  |          | GE2101 | TE214S    | TE6100    |
| AZ612  |          | GE2102 | TE313S    | TE6100-L  |
| AZ1502 |          | GE3102 | TE313S-DS | TE6101    |
| AZ3102 |          | GE4101 | TE412     | TE6101-L  |
| AZ2101 |          | GE7101 | TE412-L   | TE12000   |
| AZ4101 |          |        | TE601     | TE12000-L |
| AZ6101 |          |        | TE601-L   |           |
|        |          |        | TE612     |           |
|        |          |        | TE612-L   |           |

\*\*\*\*\*

Anhang 2 / *Annex 2*

Liste der angewendeten harmonisierten Europäischen Normen  
*List of the applied harmonized European Standards*

1. Richtlinie 2004/108/EG / *Directive 2004/108/EC*

EN 61326-1:2006 Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte – EMV- Anforderungen – Teil 1: Allgemeine Anforderungen (IEC 61326-1:2005)  
*Electrical equipment for measurement, control and laboratory use – EMC requirements – Part 1: General requirements (IEC 61326-1:2005)*

2. Richtlinie 2006/95/EG / *Directive 2006/95/EC*

EN 61010-1:2001 Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte – Teil 1: Allgemeine Anforderungen (IEC 61010-1:2001)  
*Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use – Part 1: General requirements (IEC 61010-1:2001)*

\*\*\*\*\*

Sartorius AG  
Weender Landstrasse 94–108  
37075 Goettingen, Allemagne

Tél. +49.551.308.0  
Fax +49.551.308.32 89  
[www.sartorius-mechatronics.com](http://www.sartorius-mechatronics.com)

Copyright by Sartorius AG,  
Goettingen, République Fédérale  
d'Allemagne.

Tous droits réservés. Toute  
reproduction ou traduction,  
intégrale ou partielle, faite sans  
le consentement écrit de la  
société Sartorius AG, est illicite.  
Les informations et les illustra-  
tions contenues dans ce manuel  
correspondent à l'état à la date  
indiquée ci-dessous.

Sartorius AG se réserve le droit  
de modifier la technique, les  
équipements et la forme des  
appareils par rapport aux  
informations et illustrations  
de ce manuel.

Etat :  
Septembre 2010, Sartorius AG,  
Goettingen, Allemagne

Imprimé en Allemagne  
sur papier non blanchi au chlore  
W1A000 · KT  
N° de publication : WTE6001-f10096